

วิธีการตรวจสอบและPack Specimen PCR-Covid-19 เพื่อส่งตรวจ
ของงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเขาย้อย อำเภอยาย้อย จังหวัดเพชรบุรี




ภาพตัวอย่างที่ 1 พันรอบฝาหลอดด้วยแผ่น Parafilm



ภาพตัวอย่างที่ 2 ใส่ถุงซิปลิ้นที่ 1 ใส่ถุงซิปลิ้นที่ 2 และติดชื่อ

วิธีการตรวจสอบและPack Specimen PCR-Covid-19 เพื่อส่งตรวจ
ของงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเขาย้อย อำเภอยะย้อย จังหวัดเพชรบุรี

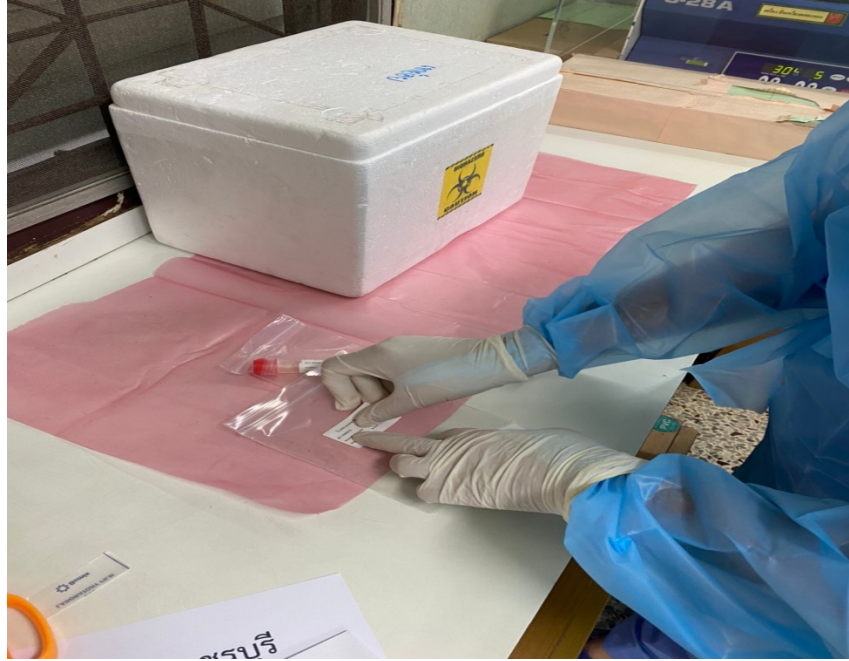

ภาพตัวอย่างที่ 2 ต่อ ใส่ถุงซิปลิ้นที่ 1 ใส่ถุงซิปลิ้นที่ 2 และติดชื่อ



ภาพตัวอย่างที่ 3 ใส่ถุงซิปลิ้นที่ 3 ฉีดแอลกอฮอล์ที่ถุง วางตั้งตรงในกล่องใส่ ice pack ปิดกล่องและพันรอบฝา
กล่องฉีก แอลกอฮอล์

วิธีการตรวจสอบและPack Specimen PCR-Covid-19 เพื่อส่งตรวจ
ของงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเขาย้อย อำเภอยาย้อย จังหวัดเพชรบุรี




ภาพตัวอย่างที่ 3 ต่อ ใส่ถุงซิปลิ้นที่ 3 ฉีดแอลกอฮอล์ที่ถุง วางตั้งตรงในกล่องใส่ ice pack ปิดกล่องและพันรอบฝากล่องฉีก แอลกอฮอล์



ภาพตัวอย่างที่ 3 ต่อ ใส่ถุงซิปลิ้นที่ 3 ฉีดแอลกอฮอล์ที่ถุง วางตั้งตรงในกล่องใส่ ice pack ปิดกล่องและพันรอบฝากล่องฉีก แอลกอฮอล์

วิธีการตรวจสอบและPack Specimen PCR-Covid-19 เพื่อส่งตรวจ
ของงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเขาย้อย อำเภอยะย้อย จังหวัดเพชรบุรี

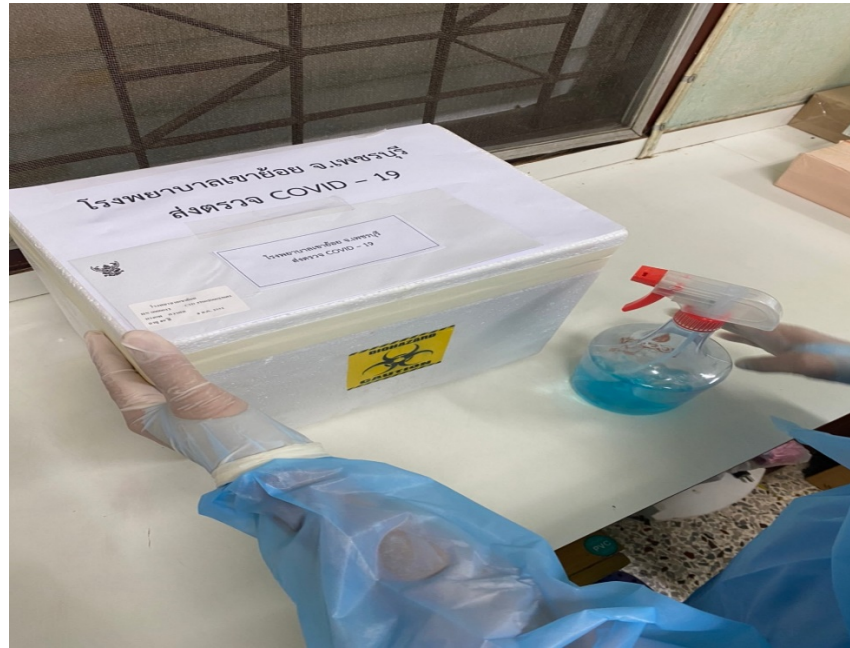

ภาพตัวอย่างที่ 3 ต่อ ใส่ถุงซิปลิ้นที่ 3 ฉีดแอลกอฮอล์ที่ถุง วางตั้งตรงในกล่องใส่ ice pack ปิดกล่องและพันรอบปากกล่องฉีก แอลกอฮอล์